

## 第7章 点検・保守

---

本装置をより長く快適にお使いいただくために、定期的に行っていただきたい点検と保守について説明します。

## 7.1 点検・保守項目リスト

### ■点検項目リスト

各項目の説明については、「7.2 点 検」を参照してください。

以下の点検項目リストにあげた項目が正常に動作しないときは、お買い上げ店または当社にご連絡ください。

表7.1 点検項目リスト

動作点検項目	点検時期
主電源スイッチ(漏電遮断器)の動作テスト	・1回/1ヵ月 ・長時間連続して運転する前
温度過昇防止器の動作テスト	・運転を開始する前
加湿皿、加湿皿水位調節器の水位確認(PWLのみ)	・1回/3ヵ月 ・移動時 「4.5 水位を確認する」参照

### ■保守項目リスト

各項目の説明については、「7.3 保 守」を参照してください。

表7.2 保守項目リスト


保守項目	時 期
凝縮器用フィルタの清掃	1回/1ヵ月
給水タンク(携帯用、固定用)とタンク用フィルタの清掃(PWLのみ)	1回/1ヵ月
給水ポンプ用フィルタの清掃(PWLのみ)	1回/1ヵ月
加湿皿の清掃	1回/1ヵ月
槽内の清掃	運転開始前
観測窓ガラスの清掃	運転開始前
配電室・水回路室(排熱室)内の清掃	1回/1年
長期間使用しない場合の処置	長期間使用しないとき
給水ポンプへの呼び水方法(PWLのみ)	長期間使用しなかった後使用するとき

## 7.2 点 検

### 主電源スイッチ(漏電遮断器)の動作テスト

1ヵ月に1回または長期間連続して運転する前に、主電源スイッチ(漏電遮断器)の動作をテストしてください。

主電源スイッチ(漏電遮断器)がONの状態、テストボタンを軽く押します。テストボタンを押して、主電源スイッチ(漏電遮断器)のレバーが落ちれば正常です。

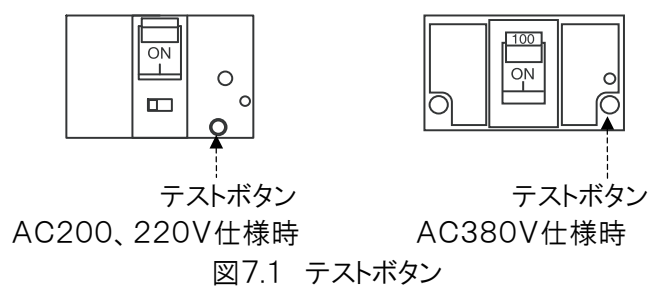

**参 考** 主電源スイッチ(漏電遮断器)のレバーが落ちると、レバーはONとOFFの中間の位置に止まります。電源をONにするときは、一旦レバーをOFF側に倒してから、ONに入れてください。

### 温度過昇防止器の動作テスト

運転を開始する前に、温度過昇防止器の動作テストを行ってください。

- 手 順**
1. 主電源スイッチがONになっていることを確認します。
  2. **電源** キーを押して、計装の電源をONにします。  
メニューが表示されます。
  3. 外づけの**運転 開始/終了** キーまたは画面上段の運転状態表示部を押して、運転操作選択画面にします。次に、定値運転の**運転開始** キーを押して、実行確認画面で**はい** キーを押します。  
装置の運転が開始されます。

4. 温度過昇防止器を槽内の温度より5°C程度低い温度に設定します。  
温度過昇防止器が正常な場合、ブザーが鳴り、計装に警報を示す画面が表示されます。設定器の表示部は、全桁点滅します。  
ブザーが鳴らない場合は異常があります。お買い上げ店または当社にご連絡ください。

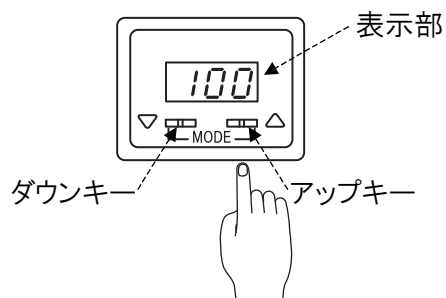


図7.2 温度過昇防止器

5. ブザーを解除するには、**ブザー停止** キーを押します。  
温度過昇防止器の設定を元の値に戻します。

## 7.3 保 守

### 凝縮器用フィルタの清掃

凝縮器にほこりが付くのを防止している凝縮器用フィルタを清掃します。

- 手 順
1. 凝縮器用フィルタを取りはずします。
  - 2、3型は、下図のように装置左側面から1枚取りはずします。
  - 4型は、給水タンク収納ユニット裏側から2枚取りはずします。

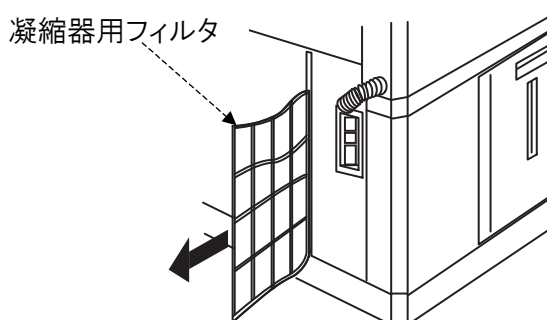


図7.3 凝縮器用フィルタの取りはずし(2、3型)

2. フィルタに付いたほこりやごみを水で流します。
3. 水で流した後は日陰で乾燥させます。  
凝縮器用フィルタは樹脂製です。日光を直接当てると、変形することがあります。
4. 凝縮器用フィルタを元どおりに取り付けます。

## 給水タンクとタンク用フィルタの清掃(PWLのみ)

1ヵ月以上給水タンク内に水が滞留していると、水が腐敗している恐れがあります。そのまま使うと加湿用ヒータや湿球用ウイックの寿命が短くなります。そのため1ヵ月ごとに給水タンクとフィルタを清掃してください。

給水タンクは携帯用と固定用があり、固定タンクの給水口にはタンク用フィルタとフィルタカバーが付いています。

タンク用フィルタを取りはずすときは、軸部を持ち、前後左右にゆっくりと揺らしながら引っ張ってください。

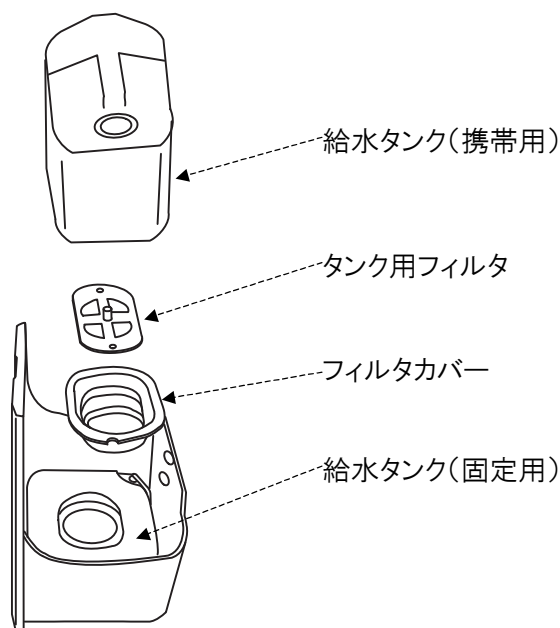


図7.4 給水タンク収納ユニット内

### ⚠ 注意

- 清掃のために取りはずした部品は、清掃後確実に元どおりに取り付けてください。  
漏水事故や給水不良の原因となります。
- フィルタカバーの下端は、給水タンク(固定用)の給水口の縁にはめ込んでください。

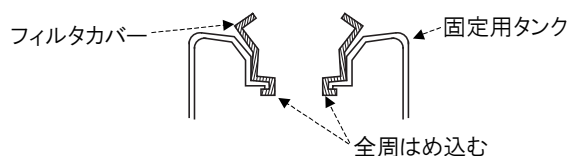


図7.5 フィルタカバー

- タンク用フィルタはフィルタカバーの底面までしっかりと押し込んでください。  
フィルタカバーの破損や給水不良の原因となります。

### ■給水タンク(携帯用)の清掃

- 手 順
1. 給水タンク収納ユニットから給水タンク(携帯用)を取りはずします。
  2. ふたを開け、給水口から約2Lの水を入れます。
  3. 給水タンク内がきれいになるように、給水タンクを上下左右に揺り動かします。
  4. 給水タンクの底にある弁を押して開き、排水します。

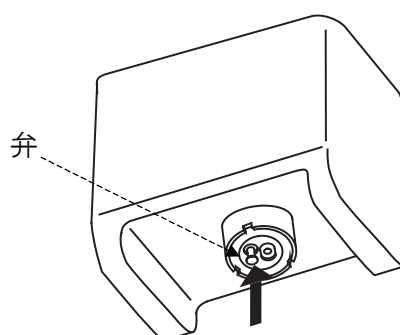


図7.6 給水タンク(携帯用)からの排水

5. 手順2～4を2～3回繰り返します。
6. 給水タンク(携帯用)を元どおり取り付けます。

### ■給水タンク(固定用)の清掃

#### ⚠必ず実施(⚠注意)

- 清掃は、装置停止時に行ってください。また、清掃後は加湿皿への給水操作を行ってください。  
給水操作をすることによって、自動的に水回路中のエアが抜かれ、給水量が適正に保持されます。

- 手 順
1. 給水タンク収納ユニットから給水タンク(携帯用)とタンク用フィルタ、フィルタカバーを取りはずします。
  2. 給水タンクの内面の汚れを、ナイロンたわしや布などで落とします。
  3. 給水タンクに適量の水を入れます。

4. 給水タンク収納ユニット背面のホースクリップからホースをはずし、ホースに付いているソケットからプラグを抜き、排水します。

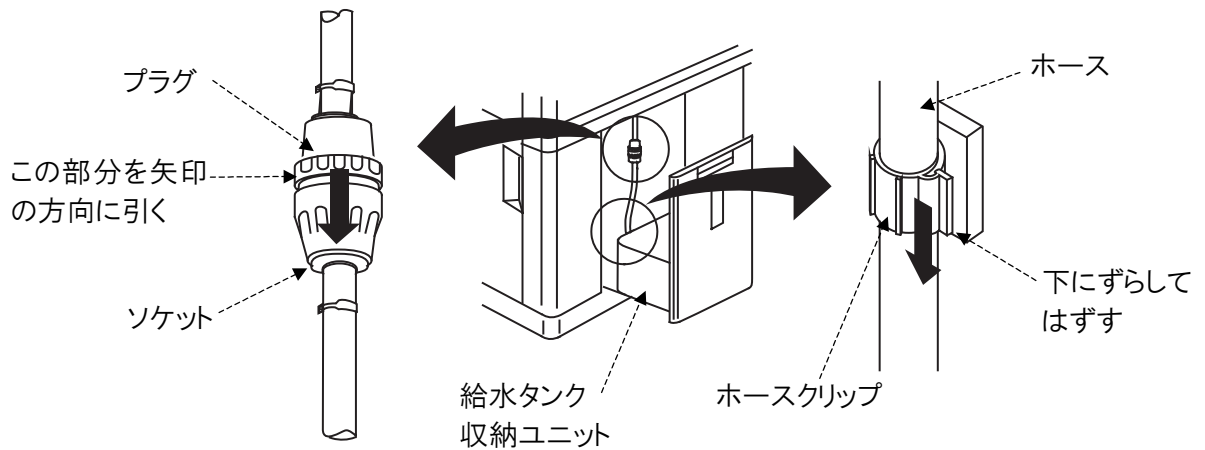


図7.7 ホースの取りはずし

5. 給水タンク内に残った水を布できれいに拭き取ります。
6. 給水タンク(携帯用)とタンク用フィルタ、フィルタカバーを元どおりに取り付けます。

#### ■タンク用フィルタの清掃

- 手 順
1. 給水タンク収納ユニットから給水タンク(携帯用)を取りはずし、タンク用フィルタを取り出します。
  2. フィルタに付いたごみを水で流します。
  3. タンク用フィルタと給水タンク(携帯用)を元どおりに取り付けます。



## 給水ポンプ用フィルタの清掃(PWLのみ)

ウィックパン給水ポンプ、加湿皿給水ポンプにゴミが入るのを防ぐため、給水ポンプにはフィルタが備えられています。  
1ヵ月に1回、必ず清掃してください。

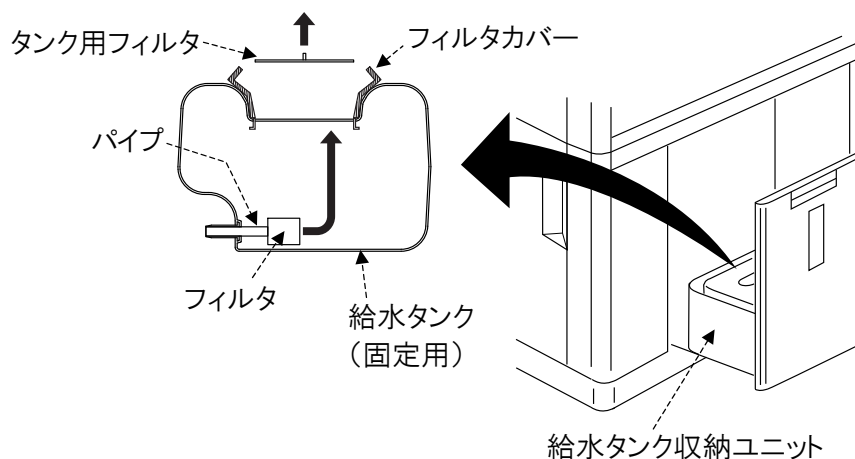


図7.8 給水ポンプ用フィルタ

### ⚠必ず実施(⚠注意)

- 清掃は、装置停止時に行ってください。また、清掃後は加湿皿への給水操作とエア抜きを行ってください。  
エア抜き操作をすることで、給水量が適正に保持されます。

- 手順**
1. 主電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
  2. 給水タンク収納ユニットから給水タンク(携帯用)を取りはずします。
  3. タンク用フィルタを取りはずします。
  4. 給水タンク(固定用)内にあるフィルタを取りはずします。(パイプからひきぬく)  
(取りはずす際タンク内に水が残っている場合は「給水タンク(固定用)の清掃」にある手順4の方法で排水してください。)
  5. フィルタに付いたごみを水で流します。
  6. 逆の手順で元に戻します。
  7. 給水操作を行います。  
温湿度運転を行ってください。

## 加湿皿の清掃

### ⚠必ず実施(⚠注意)

- 安全のために必ず手袋を着用してください。  
槽内には突起部や鋭利な形状の部分があるため、切傷などに注意してください。
- 運転終了後しばらくは、槽内は高温、高湿になっています。  
加湿皿の清掃は槽内が十分さめてから行ってください。

運転を行っていくと、加湿皿や加湿用ヒータにゴミや不純物などが付着していきます。加湿皿や加湿用ヒータの寿命を長くするために、1ヵ月に1度これらの付着物を取り除いてください。試験が終わるたびに加湿皿の水を排出すると、付着しにくくなります。

- 手 順
1. 試験槽扉を開けます。
  2. 保護柵の下側を手前に引き、次に上に持ち上げて取りはずします。

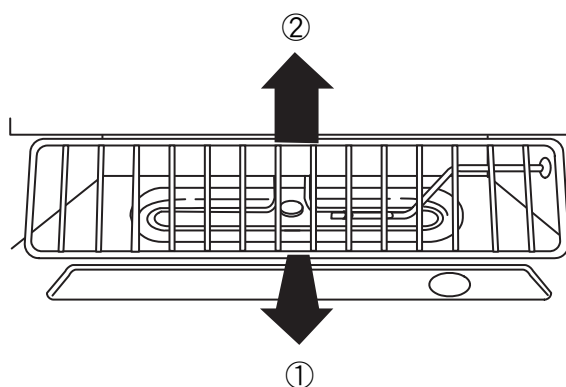


図7.9 保護柵の取りはずし

3. ブラシなどで加湿皿と加湿用ヒータの表面を清掃します。
4. 保護柵を取り付け、試験槽扉を閉めます。

## 槽内の清掃

槽の内面にほこりや不純物が付着していると、正確な試験結果が出ない恐れがあります。運転開始前に槽内を清掃してください。

- 手 順
1. 試験槽扉を開きます。
  2. 槽内をやわらかい布などで拭きます。
  3. 試験槽扉を閉めます。

## 観測窓ガラスの清掃

ガラスに水分が長期にわたって付着すると、アルカリ分が溶出されガラスの表面に残ります。

この状態で乾燥、結露を繰り返すとガラスの表面状態に変化が起こり、ガラスの光沢がなくなって、曇ったような状態になる場合があります。

これはガラスの風化、一般的には「ヤケ」という現象です。

現在のところ「ヤケ」を防止する方法としてはガラスの清掃頻度を多くする以外にありません。

- 手 順
1. 試験槽扉を開きます。
  2. ガラスが濡れている場合は布で拭き取ります。  
乾燥している場合は、濡らした布できれいに拭いた後、乾いた布で拭き取ります。
  3. 試験槽扉を閉めます。

## 配電室・水回路室(排熱室)の清掃

配電室、水回路室(排熱室)にほこりがたまると、故障の原因となります。1年に1度、配電室と水回路室(排熱室)を清掃してください。

- 手 順
1. 主電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
  2. 配電室扉、水回路室扉(排熱室扉)を開きます。
  3. 配電室、水回路室(排熱室)のほこりを掃除機などで吸い取ります。
  4. 配電室扉、水回路室扉(排熱室扉)を閉めます。

## 長期間使用しない場合の処置

装置を長期間使用しない場合は、以下の全作業を必ず行ってください。以下の作業を行わないと、適切な試験を行えなくなったり、装置の寿命を短くする恐れがあります。

- 水回路内の水を入れ換える(PWLのみ)
- ウィックパンと加湿皿の水を排出する(PWLのみ)
- 乾燥運転する
- 主電源スイッチ、一次側電源をOFFにする

### ■水回路内の水を入れ換える(PWLのみ)

槽内の温湿度を70℃、90%rhに設定し、約10分間定値運転します。

- 手 順
1. 主電源スイッチがONになっていることを確認します。
  2. 槽内温湿度を定値設定で70℃、90%rhに設定します。
  3. 運転操作選択画面にします。  
外付けの **運転 開始/終了** キーまたは画面上部の運転状態表示部を押します。
  4. **運転開始** キーを押して運転を開始します。
  5. 試験槽扉を閉じた状態で約10分間運転してください。

### ■排水する(PWLのみ)

- 手 順
1. 主電源スイッチがONになっていることを確認します。
  2. **電源** キーを押して、計装の電源をONにします。
  3. ドレン切換えスイッチを「手動排水」側に約2秒間押します。  
排水が行われます。

**■乾燥運転する**

槽内を乾燥させるために運転を行います。

冷凍機を停止し、70℃以上、湿度設定OFFで約60分間定値運転します。

その後、試験槽扉を少し開け、約15分間同じ設定で定値運転します。

運転中必要に応じて、加湿皿にたまった水を手動で排出します(PWLのみ)。

- 手 順**
1. 主電源スイッチがONになっていることを確認します。
  2. 冷凍能力を手動制御で停止(OFF)に設定します。  
設定方法については「5.5 便利な機能」を参照してください。
  3. 扉を少し開けて運転するため、運転の中断および警報の発生が起これないように設定を変更します。  
設定方法は「リファレンス編 5.11 環境設定 復帰処理設定をする」を参照して、次のように設定してください。
    - 一時停止動作設定を **しない** に設定する。
    - 扉警告待ち時間を無効に設定する。
  4. 槽内温度を定値設定で70℃以上、槽内湿度をOFF(PWLのみ)に設定します。
  5. 運転操作選択画面にします。  
外づけの **運転 開始/終了** キーまたは画面上部の運転状態表示部を押してください。
  6. **運転開始** キーを押して運転を開始します。  
試験槽扉を閉じた状態で約60分間運転し、その後、試験槽扉を少し開いた状態で約15分間運転します。
  7. 手順3で設定した項目を元に戻しておきます。

**お願い** 運転中必要に応じて、加湿皿にたまった水を手動で排出してください(PWLのみ)。

**■電源を切る**

主電源スイッチをOFFにした後、一次側電源もOFFにしてください。

## 給水ポンプへの呼び水方法

長期に渡り装置を使用されなかった時にチューブ内に水がない場合はポンプ内の部品が固着するため、ウイックパン給水ポンプ、加湿皿給水ポンプから給水されないことがあります。その場合、ウイックパン給水ポンプの1次側（ポンプの下側）、加湿皿給水ポンプの1次側（ポンプの下側）に水を溜めて給水させます。チューブ内に十分水があれば、この作業は不要です。

- 手順**
1. 主電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
  2. 水回路室扉を開けます。Lチーズに取り付けてあるウイックパン給水チューブ、加湿皿給水チューブからプライヤを使用してクレセントクランプをはずします。

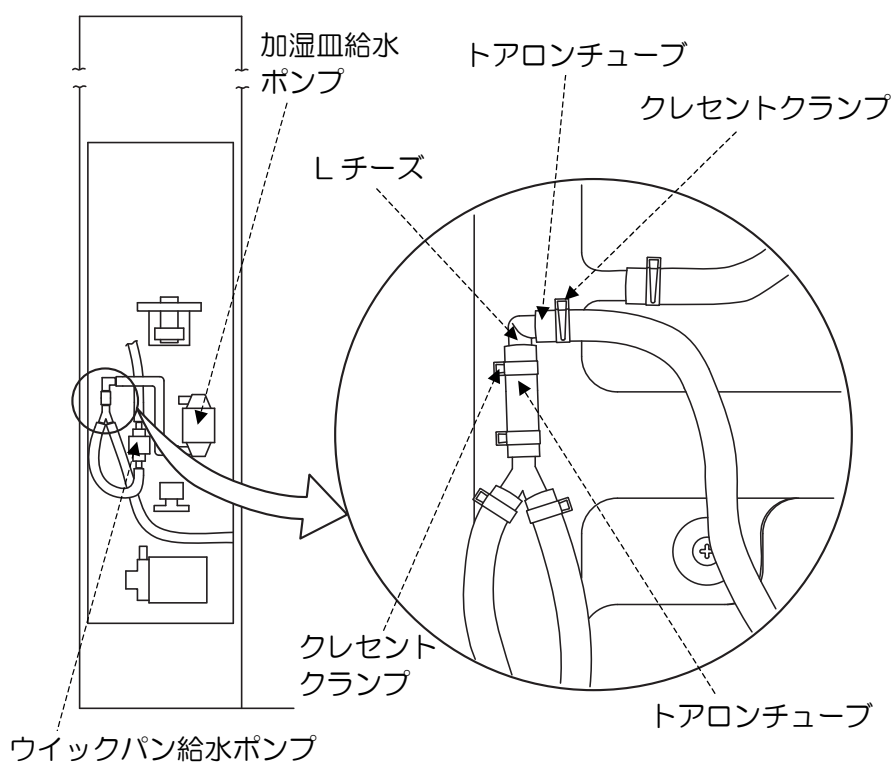


図7.10 クレセントクランプの取りはずし

3. トアロンチューブを軽く引っ張りLチーズからはずしてください。  
(チューブが抜けにくい場合があります。Lチーズが破損しないように注意してください。)

4. Lチーズからはずしたアロンチューブの中に呼び水を注入します。  
(小さい容器やジョウゴを使うと便利です。)

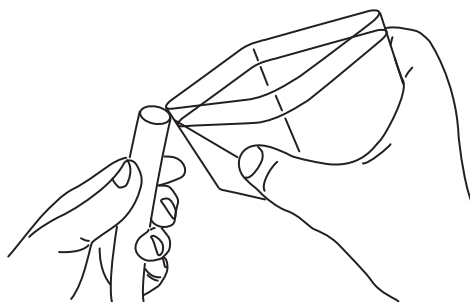


図7.11 呼び水の注入-1

**⚠ 注意**

- 給水ユニットの電気部品に水がかからないように注意してください。

5. ポンプの下部チューブに、水が溜まるまで注入します。  
注水する時、チューブを揺すり、空気を抜きながら注入すると早く注入できます。

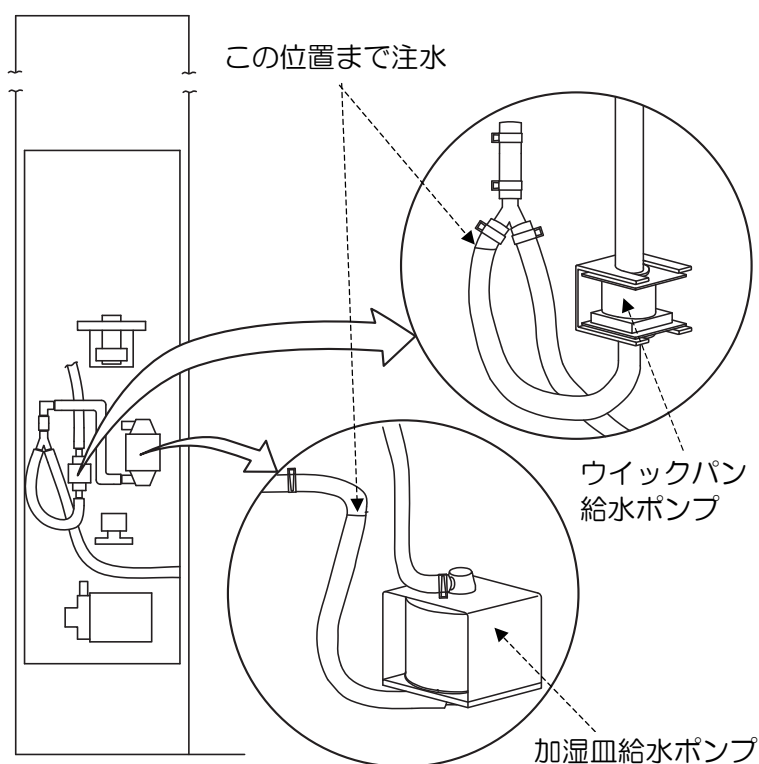


図7.12 呼び水の注入-2

6. 水が注入できれば、はずしたアロンチューブをLチーズに奥まで差し込み、クレセントクランプを元通りに取り付けます。

**お願い** 接続したトアロンチューブが軽く引っ張っても抜けないことを確認してください。

7. 水回路室扉を閉めて主電源スイッチをONにし、湿度運転をします。
8. 装置内槽奥側の加湿皿に供給されます。給水途中にウイックパンのポンプが動き出します。  
その後加湿皿にウイックパンからオーバーフローした水が落下してきます。水の落下が確認できない場合は本体を停止し、再び湿度運転を行ってください。

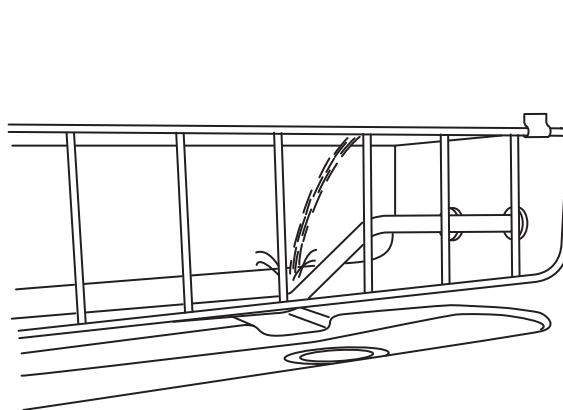


図7.13 水の落下確認

9. 4～5回再始動を行っても水が加湿皿に落ちてこない場合は、お買い上げ店または当社にご連絡ください。



## 第8章 トラブルシューティング

---

本装置のトラブルとその処置方法について説明します。

本装置の自己診断機能がトラブルを検知すると、計装表示部にトラブル内容を表示し、ブザーでトラブルを知らせます。自己診断できないトラブルや故障とまちがえやすい操作ミスについては、「8.2 故障とおもったら？」をお読みください。

## 8.1 警報とその処置

### ⚠ 危険

- 主電源スイッチ(漏電遮断器)の一次側の処置をするときは、必ずお客様設備の電源開閉器をOFFにして非通電状態で行ってください。また、不用意に通電されないように処置してください。

電源がONの状態ではトラブルの処置をすると、感電する恐れがあり、非常に危険です。

- 配電室扉、水回路室扉(排熱室扉)を開けるときは、必ず主電源スイッチ(漏電遮断器)をOFFにしてから開けてください。

本装置には、トラブルが発生するとブザーを鳴らし、その内容を計装の表示部に表示する自己診断機能があります。

表示されるトラブルの内容については、次ページ以降の警報一覧に記しています。内容に対応する処置を施してください。

また、自己診断されないトラブルが発生した場合の処置方法については、「8.2 故障とおもったら？」に説明しています。処置を施しても装置が正常に動作しない場合は、お買い上げ店または当社にご連絡ください。

### 警報の処置方法


本装置にトラブルが発生し、自己診断機能が働いた場合の処置方法を説明します。

警報時の状態には次の3通りがあります。それぞれの処置方法で警報の処置を行ってください。

- 定値運転中の場合
- プログラム運転中で警報復帰後に運転を継続する必要がない場合
- プログラム運転中で警報復帰後に警報発生前の運転を継続したい場合

■ 定値運転中の場合、またはプログラム運転中で警報復帰後に運転を継続する必要がない場合


- 手順 1. 計装の **ブザー停止** キーを押して、ブザーを止めます。

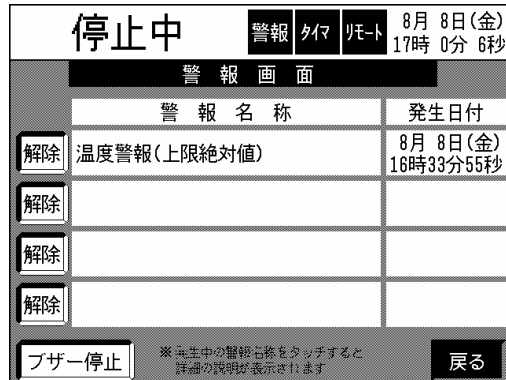

2. 装置が運転されている場合、外づけの **運転 開始/終了** キーまたは画面上段の運転状態表示部を押して、運転操作選択画面にします。  
次に、 **停止実行** キーを押して運転を終了します。
3. 外づけの **電源** キーを押して、計装の電源をOFFにします。
4. 主電源スイッチをOFFにします。
5. 警報一覧を参照し、計装の表示部に表示されていたエラーメッセージに対応した処置を施します。
6. 主電源スイッチ、計装の順に電源をONにします。  
メニューが表示されます。

■プログラム運転中で警報復帰後に警報発生前の運転を継続したい場合


- 手順 1. 計装の **ブザー停止** キーを押して、ブザーを止めます。

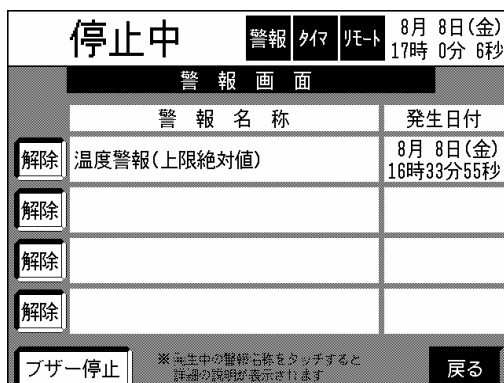

2. 外づけの **電源** キーを押して、計装の電源をOFFにします。  
警報一覧を参照し、主電源スイッチをOFFする必要がない場合は主電源スイッチをONの状態にしておいてください。
3. 警報一覧を参照し、計装の表示部に表示されていたエラーメッセージに対応した処置を施します。
4. 計装の電源をONにします。
5. 主電源スイッチをOFFにしていない場合、運転再開確認画面が表示されますので、運転の継続または停止を選択します。  
主電源スイッチをOFFにした場合、主電源スイッチ、計装の順に電源をONにし、運転を開始します。

**はい** : 警報発生前の状態から運転を再開します。

**いいえ** : 運転停止状態にします。

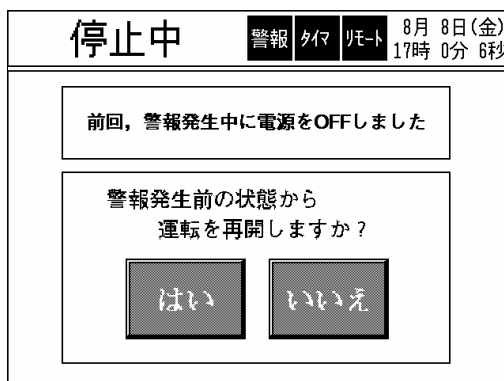

## 警報一覧

表8.1 警報一覧

ディスプレイ表示/ [通信機能(オプション) での表示]	内容	原因	処置
センサ断線 (Ai-0ch)  [0]	温調器ユニットの室温補償入力断線したので装置の制御を停止しています。	制御基板(SCP-220 (ANALOG))のRTD端子の「ゆるみ」か基板上部品の断線です。	<b>電源</b> キーをOFFにしたあと、運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
センサ断線 (Ai-1ch)  [0]	温調器ユニットの乾球入力断線したので装置の制御を停止しています。	制御基板(SCP-220 (ANALOG))のTD端子の「ゆるみ」か接続されている熱電対の断線です。	<b>電源</b> キーをOFFにしたあと、運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
センサ断線 (Ai-2ch)  [0]	温調器ユニットの湿球/湿度入力断線したので装置の制御を停止しています。	制御基板(SCP-220 (ANALOG))のTW端子の「ゆるみ」か接続されている熱電対の断線です。	<b>電源</b> キーをOFFにしたあと、運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
センサ断線 (Ai-4ch)  [0]	温調器ユニットの湿度センサ入力(オプション)断線したので、装置の制御を停止しています。	制御基板(SCP-220 (ANALOG))の湿度センサ端子の「ゆるみ」か、基板上部品の断線です。	<b>電源</b> キーをOFFにしたあと、運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
湿度センサ (Ai-4ch) 湿度センサ脱落  [0]	湿度センサユニット(オプション)の異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	湿度センサ内部のセンサ素子(温度計測用)が脱落あるいは故障しています。	試験槽内にある湿度センサの検出端を確認してください。確認後も再発する場合、サービスコールしてください。
湿度センサ (Ai-4ch) 湿度センサ脱落  [0]	湿度センサユニット(オプション)の異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	湿度センサ内部のセンサ素子(温度計測用)が脱落あるいは故障しています。	試験槽内にある湿度センサの検出端を確認してください。確認後も再発する場合、サービスコールしてください。
湿度センサ (Ai-4ch) 電源異常  [0]	湿度センサユニット(オプション)の異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	湿度センサユニットに供給されている電源電圧が異常です。	湿度センサに供給されている電源電圧を確認してください。確認後も再発する場合、サービスコールしてください。
センサ断線 (Ai-5ch~12ch)  [0]	温調器ユニットの冷凍回路測定チャンネル(Ai-5~12ch)断線したので装置の制御を停止しています。バックアップ運転(する)場合、複数冷凍機が搭載されている装置では該当する冷凍機のみ運転停止し、装置の制御を継続しています。	制御基板(SCP-220 (ANALOG))のAi5~12端子の「ゆるみ」か、接続されている熱電対の断線です。	装置の運転終了後に <b>電源</b> キーをOFFにしたあと、運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
温度警報 (上限偏差)  [1]	槽内温度が、設定されている温度警報の上限偏差値を超えたので復帰するまで加熱制御を停止しています。	槽内に設置されている供試品からの発熱により測定温度が上昇したか、温度警報・上限偏差値が低めに設定されています。	槽内の発熱物を取り除き、温度警報・上限偏差値は10℃を目安に設定してください。槽内温度が槽内設定温度に下がれば装置は通常制御に戻り、 <b>ブザー停止</b> キーによって警報は解除されます。
温度警報 (上限絶対)  [2]	槽内温度が、設定されている温度警報の上限絶対値を超えたので、装置の制御を停止しています。	槽内に設置されている供試品からの発熱により測定温度が上昇したか、温度警報・上限絶対値が低めに設定されています。	<b>電源</b> キーをOFFにしたあと、槽内の発熱物を取り除き、温度警報・上限絶対値を槽内の設定温度より約15℃高めに設定してください。運転再開後も再発する場合はサービスコールしてください。

つづく

## 第8章 トラブルシューティング

ディスプレイ表示/ [通信機能(オプション) での表示]	内容	原因	処置
温度警報 (下限絶対)  [3]	槽内温度が設定されている温度警報 の下限絶対値を下回ったので、装置の 制御を停止しています。	槽内への外気侵入、冷 凍能力の過剰、あるいは 槽内に設置されている 冷却源の影響が考えら れます。または、温度警 報・下限絶対値が高め に設定されています。	【電源】キーをOFFにしたあと、本体扉 やケーブル孔を確認し、冷凍能力手動 制御時は「能力」を再設定したり、槽内 の冷却源過剰の場合は設置数量を少 なくしてください。運転再開後も再発す る場合はサービスコールしてください。
温度過昇  [6]	槽内温度が、温度過昇防止器(計装パ ネルに設置)の設定値を超えたので、 装置の制御を停止しています。 (設定器表示部、全桁点滅する)  温度過昇防止器用温度検出端の異常 (設定器表示部、バーンアウト表示 "---"する)	試験槽内の供試品から の発熱で槽内温度が上 昇したか、温度過昇防 止器が槽内設定温度よ り低く設定されていま す。  温度過昇防止器の端子 の「ゆるみ」か、接続さ れている熱電対の断線で す。	【電源】キーをOFFにしたあと、槽内の 発熱物を取り除き、過昇防止器を正しく 設定してください。運転再開後も再発す る場合、温度ヒューズの溶断が考えら れますのでサービスコールしてください。  【電源】キーをOFFにしたあと、運転を 再開してください。運転再開後も再発す る場合、サービスコールしてください。
送風機異常  [7]	水回路室(排熱室)の上部にある試験 槽内送風機モータ周辺が、異常高温に なり、送風機に内蔵している温度スイ ッチが動作したので装置の制御を停止 しています。	送風機モータの過負荷 運転です。	しばらく装置の運転を停止して、送風機 を冷却してください。その後、【電源】キ ーをONにして運転を再開してください。
冷凍機 高圧異常  [8]	冷凍機の高圧圧力が上昇し、高圧圧 力スイッチが動作したので、装置の制 御を停止しています。	冷凍機の運転圧力が規 定水準を超えています。	【電源】キーをOFFにしたあと、空冷仕 様では凝縮器フィルタの目詰りを、また 水冷仕様は冷却水の水温や流量を確 認してください。適切な処置を行ったあ と、運転再開後も再発する場合はサー ビスコールしてください。
冷凍機 電流値異常  [8]	冷凍機の電流値が上昇し、サーマルリ レーが動作したので、装置の制御を停 止しています。	冷凍機の運転電流値が 規定水準を超えていま す。	【電源】キーをOFFにしたあと、空冷仕 様では凝縮器フィルタの目詰りを、また 水冷仕様は冷却水の水温や流量を確 認してください。適切な処置を行ったあ と、運転再開後も再発する場合はサー ビスコールしてください。
冷凍機 表面温度異常  [8]	冷凍機の表面温度が上昇し、圧縮機 温度スイッチが動作したので、装置の 制御を停止しています。	冷凍機の表面温度が規 定水準を超えています。	【電源】キーをOFFにしたあと、空冷仕 様では凝縮器フィルタの目詰りを、また 水冷仕様は冷却水の水温や流量を確 認してください。適切な処置を行ったあ と、運転再開後も再発する場合はサー ビスコールしてください。
冷凍機 凝縮器ファン異常  [8]	凝縮器ファンモータの電流値が上昇 し、サーマルリレーが動作したので装置 の制御を停止しています。	凝縮器ファンモータの電 流値が規定水準を超え ています。	【電源】キーをOFFにしたあと、凝縮器フ ィルタの目詰まりを確認してください。適 切な処置を行った後、運転再開後も再 発する場合は、サービスコールしてくだ さい。
冷凍機 冷却水断水  [8]	冷凍機の凝縮器用冷却水の水圧が低 下して、断水リレーが動作したので、装 置の制御を停止しています。	クーリングタワー(冷却水 ポンプ)停止、給水弁の 「閉」状態や、ストレーナ の目詰まり、冷却水配管 系統での「水漏れ」が考 えられます。	【電源】キーをOFFにしたあと、クーリン グタワーの運転や給水弁の弁開度、ス トレーナの目詰まり、配管系統の「漏れ 」を確認してください。運転再開後も再 発する場合は、サービスコールしてくだ さい。
冷凍回路 ※ 温度範囲外 (Ai-5ch~12ch)  [8]	温調器ユニットの冷凍回路測定チャン ネル(Ai-5~12ch)が規定水準から 外れた温度を測定したので装置の制御 を停止しています。バックアップ運転(す る)場合、複数冷凍機が搭載されてい る装置では該当する冷凍機のみ運転停止 し、装置の制御を継続しています。	霜付き、圧縮機の異 常、冷媒漏れなどの可 能性があります。	装置の運転終了後に【電源】キーをOF Fにしたあと、運転を再開してください。 運転再開後も再発する場合は、サービ スコールしてください。

※計装に表示される故障内容以外の原因で警報が発生する場合があります。詳細はリファレンス編第5章を参照してください。

つづく

ディスプレイ表示/ [通信機能(オプション) での表示]	内容	原因	処置
加熱器異常  [11]	加熱器の電流値が上昇して、加熱器用サーキットプロテクタが動作したので装置制御を停止しています。	加熱器回路の短絡、あるいは過電流です。	主電源スイッチをOFFにしたあと、配電室内にある電装シャーシ上の加熱器用サーキットプロテクタを復帰させてください。その後、主電源スイッチをONにしたあと「電源」キーをONにして運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
電源逆相  [19]	主電源(一次側3相電源)の逆相接続、あるいは欠相接続を検出したので、装置の制御を停止しています。	装置に供給されている主電源の接続が正しくありません。	装置に搭載されている機器に、著しく影響を与えることがあります。主電源スイッチをOFFにし、一次側3相電源の相や接続状態を確認してください。その後、「電源」キーをONにして運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
外部機器異常  [19]	装置に付加されている外部機器の異常を検出したので装置の制御を停止しています。	外部機器の異常内容については、外部機器に付属の取扱説明書を参照してください。	「電源」キーをOFFにしたあと、外部機器の取扱説明書を参照して適切な処置を行ってください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
加湿器異常  [21]	加湿器の電流値が上昇して、加湿器用サーキットプロテクタが動作したので装置の制御を停止しています。バックアップ運転(する)の場合、湿度運転を中止し、温度運転を継続しています。	加湿器回路の短絡、あるいは過電流です。	主電源スイッチをOFFにしたあと、配電室内にある電装シャーシ上の加湿器用サーキットプロテクタを復帰させてください。その後、主電源スイッチをONにしたあと「電源」キーをONにして運転を再開してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
	加湿器の表面温度が上昇して加湿器用空焚防止器が動作したので装置の制御を停止しています。バックアップ運転(する)の場合、湿度運転を中止し、温度運転を継続しています。	加湿器の表面温度が規定水準を超えています。	「電源」キーをOFFにしたあと、ウイックパン水位調節器の水位を確認、調整してください。その後しばらく装置の運転を停止して、加湿器を冷却してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。
湿度警報 (上限絶対)  [22]	槽内湿度が、設定されている湿度警報の上限絶対値を超えたので、復帰するまで加湿器制御を停止しています。	湿度警報・上限絶対値が低めに設定されています。	湿度警報・上限絶対値は、槽内設定湿度より約10%rh高めに設定してください。槽内湿度が槽内設定湿度に下がれば、「ブザー停止」キーによって警報は解除されます。
湿度警報 (下限絶対)  [23]	槽内湿度が、設定されている湿度警報の下限絶対値を下回ったので、復帰するまで加熱制御を停止し、冷凍能力を最小に(状況に応じて冷凍機を停止)しています。	湿度警報・下限絶対値が高めに設定されています。	湿度警報・下限絶対値は、槽内設定湿度より約10%rh低めに設定してください。槽内湿度が槽内設定湿度に上がれば、「ブザー停止」キーによって警報は解除されます。
加湿皿排水異常  [26]	加湿皿の水を排出しようとしたのですが、水位が低下しないので装置制御を停止しています。	排水ポンプの動作不良か、排水系統の目詰まりです。	水回路室の水回路ユニット内にある排水ポンプの動作確認や排水パイプ系統の目詰まりを確認、あるいは洗浄してください。運転再開後も再発する場合、サービスコールしてください。

つづく

## 第8章 トラブルシューティング

ディスプレイ表示/ [通信機能(オプション) での表示]	内 容	原 因	処 置
給水タンク満水  [26]	給水用タンク(固定用)の水が無くなったので装置の湿度制御を停止しています。	給水用タンク(固定用)の水が無くなりました。	給水用タンク(携帯用)に水を補給して、タンクユニットにセットしてください。給水完了後は、「ブザー停止」キーによって警報は解除されます。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
加湿皿 初期 給水異常  [26]	湿度運転を開始したあと、加湿皿への初期給水時に規定時間で満水とならないので装置の制御を停止しています。バックアップ運転(する)の場合、湿度運転を中止し、湿度運転を継続しています。	加湿給水系統(ストレーナ)の目詰まりや水漏れ、または供給水圧の低下です。	装置の運転終了後に、加湿給水系統の確認を行ってください。給水を復帰させ、運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
加湿皿 通常 給水異常  [26]	湿度運転中に、加湿皿への給水が規定時間で満水とならないので装置の制御を停止しています。バックアップ運転(する)の場合、湿度運転を中止し、湿度運転を継続しています。	加湿給水系統(ストレーナ)の目詰まりや水漏れ、または供給水圧の低下です。	装置の運転終了後に、加湿給水系統の確認を行ってください。給水を復帰させ、運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
ウイック乾燥検出  [26]	湿度運転中に、相対湿度計測用湿球温度が規定水準を超えました。装置の湿度制御はこのまま継続しますが、正確な湿度制御が不可能となり、湿度警報を発生する場合があります。	槽内に設置されている湿球用ウイック(ガーゼ)の乾燥が考えられます。	装置の運転を停止し、湿球用ウイックを交換して湿球温度が規定水準範囲に戻れば、「ブザー停止」キーによって警報は解除されます。
給水タンク減水  [26]	給水用タンク(携帯用)の水が無くなりました。給水用タンク(固定用)内の水で湿度制御は継続しますが、このまま放置されると湿度制御を停止します。	給水用タンク(携帯用)の水が無くなりました。	給水用タンク(携帯用)に水を供給してください。給水完了後は、「ブザー停止」キーによって警報は解除されます。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
通信異常-1  [99]	装置の計装(CPU基板)が、表示基板との通信障害を検出したので装置の制御を停止しています。	CPU基板/表示基板間の通信異常です。	装置の主電源スイッチを、再度ONにしてください。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
通信異常-2  [99]	装置の計装(表示基板)が、システム異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	表示基板内部のメモリなどの異常です。	装置の主電源スイッチを、再度ONにしてください。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
通信異常-4  [99]	装置の計装(CPU基板)が、システム異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	CPU基板内部のシーケンスタスク異常です。	装置の主電源スイッチを、再度ONにしてください。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
通信異常-5  [99]	装置の計装(CPU基板)が、システム異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	CPU基板内部の冷凍タスク異常です。	装置の主電源スイッチを、再度ONにしてください。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
通信異常-6  [99]	装置の計装(CPU基板)が、システム異常を検出したので、装置の制御を停止しています。	CPU基板内部の温調タスク異常です。	装置の主電源スイッチを、再度ONにしてください。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
本体扉開放  [9]	装置運転中に扉開放を検出し、所定の時間が経過しました。「一時停止」機能を選択している場合は、運転を一時停止しています。選択していない場合、このまま装置の運転を継続しますが、正常な運転ができないため、ほかの警報を発生することがあります。(警告表示選択時のみ)	「本体扉」が開放されたか、閉め方が不十分です。	本体扉を正確に閉めれば運転は再開されます。再開後、「ブザー停止」キーによって警報は解除されます。
プログラム設定値範囲外  [31]	これから実行しようとするプログラム運転データ中に、範囲外の温(湿)度設定値を検出したのでプログラム運転の実行を中止しています。	プログラム運転データ中に、装置の運転可能範囲を越える温(湿)度設定値が含まれています。	プログラム運転データの温(湿)度設定値を再確認してください。警報発生画面の「解除」キーによって警報は解除されます。運転データ再確認後も再発する場合は、サービスコールしてください。



## 8.2 故障とおもったら？

⚠ 危険
<ul style="list-style-type: none"> <li>主電源スイッチ(漏電遮断器)の一次側の処置をするときは、必ずお客様設備の電源開閉器をOFFにして非通電状態で行ってください。また、不用意に通電されないように処置してください。 電源がONの状態ではトラブルの処置をすると、感電の恐れがあり、非常に危険です。</li> <li>配電室扉と水回路室扉(排熱室扉)は、必ず主電源スイッチ(漏電遮断器)をOFFにしてから開けてください。</li> </ul>

装置が自己診断できないトラブルや、故障と思いやすい操作ミスについて説明します。

処置を行っても装置が正常に動作しないときは、お買い上げ店または当社にご連絡ください。

表8.2 故障とおもったら？

内容	原因	処置
計装パネルの「電源」キーを押しても表示しない	一次側電源がONになっていない	一次側電源をONにする
	主電源スイッチがONになっていない	主電源スイッチをONにする
	配電室扉または水回路室扉(排熱室扉)が開いている	扉を閉める
	電源が欠相になっている	正しく接続する 「4.4 電源工事を行う」を参照
	ヒューズが切れている	ヒューズF1を交換する 「8.3 処置方法」を参照 交換しても、すぐ切れるときは、サービスコールしてください。
表示部が急に消える。または、異常な表示内容が表示される	システム異常または内部基板の異常	装置の主電源スイッチを再度ONにしてください。運転再開後も再発する場合は、サービスコールしてください。
扉が締まりにくい	異物がはさまっている	異物を取り除く
	パッキンに霜が付き、硬化している	除霜運転を行う 「8.3 処置方法」を参照
	槽内が高温高湿になり、内圧が高くなっている	故障ではありません。そのまま使用してください。
扉が開けにくい	槽内が負圧になっている	故障ではありません。そのまま使用してください。
	パッキンに霜が付き、硬化している	除霜運転を行う 「8.3 処置方法」を参照

つづく

第8章 トラブルシューティング

内 容	原 因	処 置
マイナス温度運転時に内槽排水孔に、高さ5cm以上の霜柱ができた、あるいは槽内が霜降り状態になっている	ケーブル孔から外気が侵入している	ケーブル孔をケーブル孔キャップ、ケーブル孔ゴム栓でふさぐ
	扉パッキン当たり不良、扉パッキンの劣化	サービスコールしてください。
扉内側パッキン周囲に結露して装置前面より水が漏れてくる	扉パッキン当たり不良、扉パッキンの劣化	サービスコールしてください。
異音がある	霜付き防止ヒータのヒューズが切れ、送風機ファンに霜が付いている	ヒューズF3を交換 交換してもすぐ切れるときは、サービスコールしてください。 「8.3 処置方法」を参照
	凝縮器用フィルタが目づまりしている	フィルタを掃除する 「7.3 保守」を参照
異臭がある	異臭が残っている	試験槽内を掃除する 「7.3 保守」を参照
	試料から異臭が発生している	故障ではありません。そのまま使用してください。
装置が振動する	アジャスタフットの設置が適切でない	アジャスタフットを調整する 「4.1 据え付ける」を参照
扉庫内側の観測窓ガラスがくもる。または、霜が付く。	温度が急激に上昇している	故障ではありません。そのまま使用してください。
	湿度が急激に上昇している	故障ではありません。そのまま使用してください。
	霜付き防止ヒータのヒューズが切れている	ヒューズF10を交換する。 「8.3 処置方法」を参照
扉庫外側の観測窓ガラスがくもる。または、霜が付く。	周囲が高湿になっている	故障ではありません。そのまま使用してください。
	霜付き防止ヒータのヒューズが切れている	ヒューズF11を交換する。(PWLのみ) 「8.3 処置方法」を参照
装置の外側がぬれる	周囲が高湿になっている	故障ではありません。そのまま使用してください。また、運転を終了するときは、槽内を常温状態に戻してから運転を終了するようにしてください。
試験槽扉の蝶番付近、扉周囲や観測窓周囲に霜が付く	周囲が高湿になっている	故障ではありません。そのまま使用してください。
	ヒューズが切れている	ヒューズF12を交換する 交換してもすぐ切れるときは、サービスコールしてください。 「8.3 処置方法」を参照
湿球用ウイックが乾燥する	給水タンク内に雑菌が繁殖している	給水タンク、給水ポンプ用フィルタの清掃を行ってください。 「7.3 保守」を参照

つづく

内 容	原 因	処 置
温(湿)度が不安定	扉が閉まっていない	扉を閉める
	ケーブル孔ゴム栓がはずれている	ゴム栓を付ける
	外囲温度が5℃/時間以上の変化がある	外囲温度が安定してから試験を再開する
	発熱負荷の大きなものの電源がON/OFFされている	発熱負荷を小さくする
	給水ポンプ用フィルタが目詰まりしている	給水ポンプ用フィルタを清掃する 「7.3 保守」を参照
温度が徐々に設定温度より高くなる。	試料の発熱負荷が大きい	試料の発熱負荷を小さくする
	冷却器に霜が付いている	除霜運転を行う 「8.3 処置方法」を参照
設定値を変更できない	キーロックされている	キーロックを解除する
温度がすぐに下がらない	ロータリ圧縮機の特性上、冷え始めるまでに5～10分かかる	故障ではありません。そのまま使用してください。
温度上昇(下降)時間が長い。	扉が開いている	扉を閉める
	試料の熱負荷が大きい	試料を少なくする
	外囲温度が低すぎる(高すぎる)	外囲温度を高くする(低くする)
低温から高温への移行時に温度上昇が一旦止まる。または下がる。	冷却兼除湿器に霜が付いている	故障ではありません。そのまま使用してください。または、除霜運転を行う。 「8.3 処置方法」を参照
温度分布が悪い	槽内の風の流が悪い	風の流れをよくする
	試料の熱負荷が大きい	試料を少なくする
	冷却器に霜が付いている	除霜運転を行う 「8.3 処置方法」を参照
室内灯が点灯しない	ヒューズが切れている	ヒューズF2を交換する 交換してもすぐ切れるときは、サービスコールしてください。 「8.3 処置方法」を参照
	蛍光灯が切れている	蛍光灯を交換する 「8.3 処置方法」を参照
	グローランプが切れている	グローランプを交換する 「8.3 処置方法」を参照
給水タンク(携帯用)から給水されない	給水タンク(固定用)フィルタが目詰まりしている	給水タンク(固定用)フィルタを清掃する
	給水タンク(固定用)フィルタが破損している	給水タンク(固定用)フィルタを交換する。「7.3 保守」を参照
	給水タンク(固定用)フィルタが外れている	給水タンク(固定用)フィルタを取り付け直す。「7.3 保守」を参照
湿度が下がらない	冷凍能力が「手動(停止)」に設定されているため、槽内を除湿することができない	冷凍能力を「自動」または「手動(20%/50%/100%)」に変更する。 リファレンス編の「第3章 定値設定」または「第4章 プログラム設定」を参照

## 8.3 処置方法

### ヒューズの交換

ヒューズが切れたときは、付属のヒューズと交換してください。

**お願い** ヒューズを交換してもまたすぐに切れる場合は、お買い上げ店または当社にご連絡ください。


- 手順**
1. 主電源スイッチをOFFにします。
  2. 配電室扉を取りはずします。
  3. 切れているヒューズを新しいものと交換します。

ヒューズ容量  
F0:10A\*  
F1:10A\*\*  
F2:3A  
F3:3A(4型は1A)  
F10:5A\*\*\*  
F11:5A  
F12:7A

\* :AC220V仕様のみ(取付位置は配電室内)

\*\* :AC220、380V仕様は7A

\*\*\* :PWLのみ

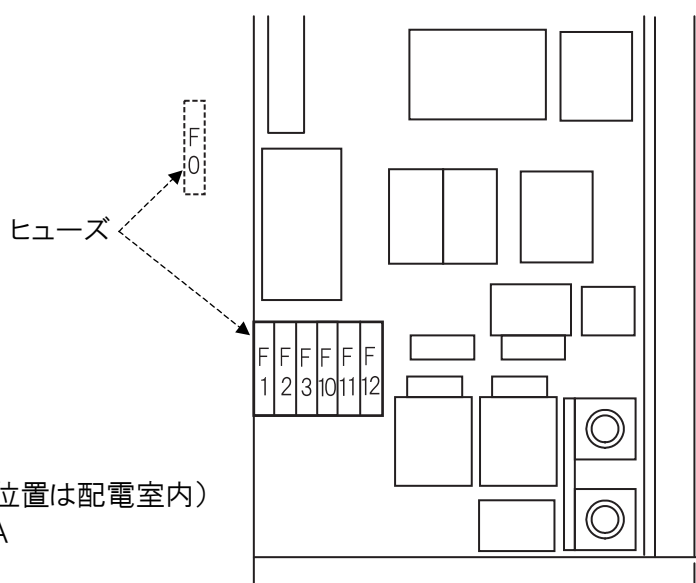

配電室内の電装シャーシ下部

図8.1 ヒューズの交換

4. 配電室扉を取り付けます。

## 室内灯の交換

室内灯は、6000時間に1回または切れたときに交換してください。蛍光灯 (FPL27EX-N松下電器製) を用意してください。

 <b>注意</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 消灯直後は、蛍光灯が高温になっていますので、やけどにご注意ください。</li> <li>• 蛍光灯は落とすと割れて危険です。ご注意ください。</li> </ul>



- 手順**
1. 主電源スイッチをOFFにします。
  2. 室内灯カバーのねじを手でゆるめてはずします。

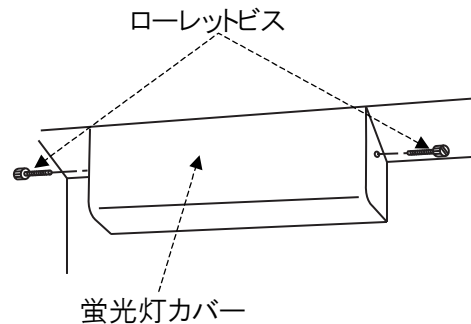


図8.2 室内灯カバーの取りはずしー1

3. 室内灯カバーを手前に取りはずします。

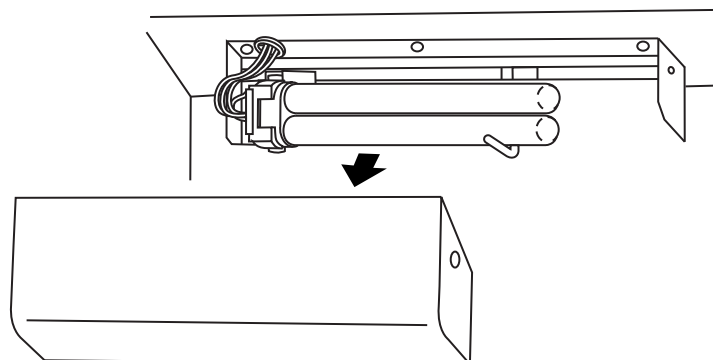


図8.3 室内灯カバーの取りはずしー2

4. 蛍光灯を手前に起こし、引っ張って取りはずします。

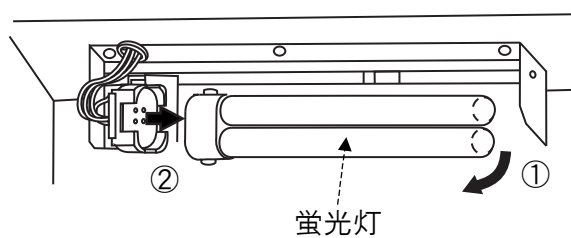



図8.4 蛍光灯の取りはずし

5. 新しい蛍光灯に交換します。
6. 室内灯カバーを取り付け、ねじで固定します。

## グローランプの交換

グローランプが切れたときは、新しいものと交換してください。

- 手順
1. 主電源スイッチをOFFにします。
  2. 配電室扉を取りはずします。
  3. 切れているグローランプを新しいものと交換します。

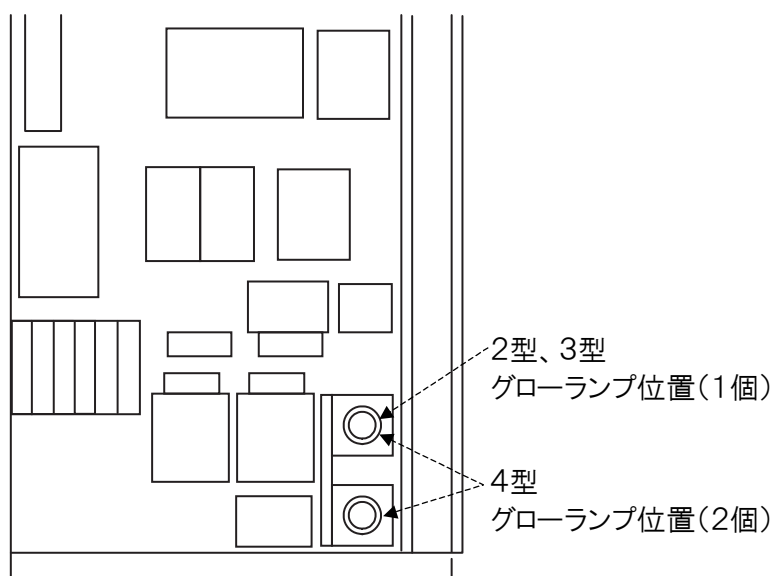

配電室内の電装シャーシ下部

図8.5 グローランプの交換

4. 配電室扉を取り付けます。

## 除霜運転

## ⚠必ず実施(⚠注意)

- 冷却器の除霜は定期的に行ってください。  
冷却器に霜が付き過ぎると、温度下降が遅い、制御が著しく乱れるなどの症状が現れます。  
この場合は、除霜運転をしないでください。  
除霜運転を行っても槽内の空気が流れないため、除霜できず、装置保護のため温度ヒューズが切れる恐れがあります。
- 冷却器に霜が付き過ぎた場合には、運転を停止させ、扉を開けた状態で自然に除霜されるまで、半日から一日程度装置を常温で放置してください。
- 冷却器に霜が付く運転を長期間連続して行うと冷凍機が故障する場合があります。必ず除霜を行ってください。  
30～40℃以下での温(湿)度運転を行うと、冷却器に霜が付きます。以下のような症状が現れた場合は、除霜運転を行ってください。

- 槽内温(湿)度が乱れたり、少しずつ上昇してくる
- 扉を開けたとき、吹き出し風速が極端に弱まった
- 槽内の壁面に霜や氷が付着している
- 温湿度運転中、内槽正面板に霜が付いた状態で「ウイック乾燥検出」の警報が表示された

また、パッキン霜付時の除霜運転も同様に以下の手順で行ってください。

## ■ 除霜運転のしかた

- 手 順
1. 主電源スイッチがONになっていることを確認します。
  2. 冷凍能力を手動制御で停止(OFF)に設定します。  
設定方法については「5.5 便利な機能」を参照してください。
  3. 扉を少し開けて運転するため、運転の中断および警報の発生が起これないように設定を変更します。  
設定方法は「リファレンス編 5.11 環境設定 復帰処理設定をする」を参照して、次のように設定してください。
    - 一時停止動作設定を しない に設定する。
    - 扉警告待ち時間を無効に設定する。
  4. 槽内温度を定値設定で70℃以上、槽内湿度をOFF(PWLのみ)に設定します。

5. 運転操作選択画面にします。

外づけの「運転 開始/終了」キーまたは画面上部の運転状態表示部を押してください。

6. 「運転開始」キーを押して運転を開始します。

試験槽扉を閉じた状態で約60分間運転し、その後、試験槽扉を少し開いた状態で約15分間運転します。

7. 手順3で設定した項目を元に戻しておきます。

**お願い** | 運転中必要に応じて、加湿皿にたまった水を手動で排出してください (PWLのみ)。