

# 6

## 日常の保守・ 点検


日常の保守・点検について説明します。装置を常に最良の状態でお使いいただくために大切な項目です。

### 6.1 漏電遮断器の動作テスト

本器では、漏電遮断器を主電源スイッチとして使用しています。ここでは、漏電遮断器としての機能を確認します。

1ヶ月に1回または長期連続運転開始前に、漏電遮断器の動作をテストしておきます。

- ・一次側電源および主電源スイッチがONの状態、テストボタン（灰色）を軽く押してください。主電源スイッチのレバーが動作（トッパ）すれば正常です。動作しない場合は、異常がありますので、お買い上げ店またはエスベックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。

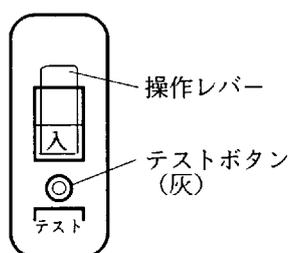

単相用

図6.1 漏電遮断器の動作テスト

## 6.2 温度過昇防止器の動作テスト

運転開始前に、温度過昇防止器の動作をテストしておきます。

- ① 温度過昇防止器の設定を器内温度以下にします。

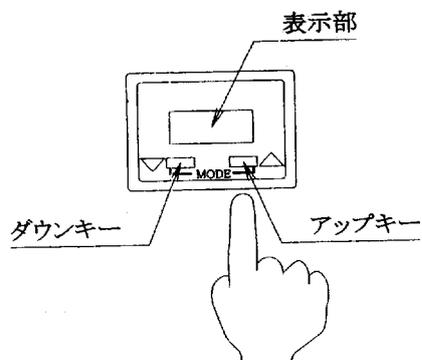


図6.2 温度過昇防止器の動作テスト

- ② 温度過昇防止器の機能が正常な場合、アラームが発生し、異常表示灯とブザーで異常を知らせます。アラームが発生しない場合は、異常がありますので、お買い上げ店またはエスペックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。

・温度過昇動作時は、設定器の表示部は、全桁点滅します。



- ③ アラームを解除するには、一度 (電源) キーを押し電源を切ってから、温度過昇防止器の設定を元の値に戻します。

## 6.3 器内の清掃

運転終了後、柔らかい布で器内の汚れを拭きとってください。

## 6.4 配電室内の清掃

---

配電室は換気を行っていますので、ホコリがたまりやすく、ホコリの堆積によって漏電や接触不良をおこす場合があります。2～3ヶ月に一度、掃除機などで清掃してください。

## 6.5 排気ダクト内の清掃

---

 <b>必ず実施</b>	
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●排気ダクト（弊社取り付けのダクトまたは貴社にて取り付けられたダクト）内の清掃を2～3ヶ月に一度必ず実施してください。</li></ul> <p>排気ダクト内で、空気中のゴミや試料から発生するベーパーがスラッジとして堆積した場合、排気による熱風で発火する恐れがあります。</p>

## 6.6 軸断熱フィルタの点検

---

試料枠回転装置のシャフト部に軸断熱フィルタを使用しています。試料にもよりますが、点検して汚れていれば交換してください。交換方法は7.4項を参照してください。

・フィルタは9枚1組となっております。

# 7

## トラブル シューティング

この装置には、主なトラブルについて自己診断を行い、内容をディスプレイに表示し、ブザーでトラブルを知らせる機能があります。これをアラームと呼びます。アラームとそれ以外のトラブルについて、トラブルの原因およびその処置を説明します。

なお、次の場合は、お買い上げ店またはエスペックエンジニアリング株式会社までご連絡ください。

- ・処置しても装置が正常に動作しない時
- ・本文中「サービスコール」と書かれたトラブルの時

### 7.1 アラームとその処置

アラームが発生したときには、次のようにして処置をしてください。

- ① アラーム内容がディスプレイに表示されます。



- ② アラーム一覧表から、表示されたアラーム番号に該当する処置をしてください。
- ③ アラームをリセットします。コントローラの **電源** キーを押してください。
- ④ 運転を再開するときは、 **電源** キーを押してください。

・AL-1、AL-9については、③、④の操作は不要です。アラームの原因を取り除けば、自動的にリセットされます。ただし、AL-9は画面表示が残りますので、**電源** キー以外のキーを押して表示を消してください。

表7.1 アラーム一覧表

ディスプレイ表示	項目	内容	推定原因	処置	
<b>AL00</b>	バーンアウト	温度検出端の異常	温度センサの接続不良	センサを正しく接続する	
<b>AL01</b>	自動温度過昇	器内温度が（設定温度+10）℃になった	試料の発熱量が大きい	試料の発熱量を減らす	
			換気量が少なすぎる	ダンパを開ける	
			設定温度が低い	（室温+20）℃以上に設定する	
<b>AL02</b>	上限温度警報	上限温度警報の設定値より器内温度が高くなった	上限温度警報の設定が低い	上限温度警報の設定を変更する	
			試料の発熱量が大きい	試料の発熱量を減らす	
<b>AL03</b>	下限温度警報	下限温度警報の設定値より器内温度が低くなった	下限温度警報の設定が高い	下限温度警報の設定を変更する	
			換気量が多すぎる	ダンパを閉じる	
<b>AL06</b>	温度過昇防止器	温度過昇防止器が動作した （設定器表示部、全桁点滅する）	温度過昇防止器の設定が低い	温度過昇防止器の設定を高くする	
			試料の発熱量が大きい	試料の発熱量を減らす	
	サーキットプロテクタ	サーキットプロテクタが動作した	温度過昇防止器用温度検出端の異常 （設定器表示部、バーンアウト表示“---”する）	温度過昇防止器用温度センサの接続不良	センサを正しく接続する
				加熱系回路の短絡あるいは過電流	サービスコール
				温度ヒューズ	温度ヒューズが溶断した
<b>AL07</b>	送風機温度スイッチ	送風機内温度スイッチが動作した	送風機のシャフトのロック	サービスコール	
<b>ALB2</b>	時間設定	プログラム運転の時間設定が0：00時間	時間設定値が適切でない	時間設定を入力する	
	温度設定	プログラム運転の各ステップの温度設定値が上下限警報設定値を越えている	温度設定値または上下限警報設定値が適切でない	温度設定値または上下限警報設定値を変更する	
<b>E1</b>	メモリーエラー	内部メモリーの異常	内部メモリーの異常	サービスコール	
<b>E2</b>	メモリーエラー	外部メモリーの異常	外部メモリーの異常	サービスコール	
<b>2</b>	CPUの異常	CPUの暴走	ノイズによる誤動作	電源環境を改善する	

## 7.2 故障とおもったら？

装置が自己診断できないトラブル、また故障と勘違いしやすい操作ミスについて説明します。ただし、一部のオプション機器が装備されているときには、異常がなくても表7.2の内容に書かれた状態になることがあります。詳細は、お買い上げ店またはエスベックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。

表7.2 故障とおもったら？

内 容	推 定 原 因	処 置	参 照
電源キーを押してもディスプレイが点灯しない	一次側電源が入っていない	一次側電源を入れる	—
	主電源スイッチが入っていない	主電源スイッチを入れる	4.6 項
	ヒューズが切れている	ヒューズを交換する	7.3 項
設定値の変更ができない	キーロックの状態になっている	キーロックを解除する	2.3 項
温度上昇（下降）時間が長い	試料の熱負荷が大きい	試料を少なくする	4.3 項
	外囲温度が低すぎる（高すぎる）	外囲温度を高くする（低くする）	—
	ダンパが開いている（閉じている）	ダンパを閉じる（開ける）	5.1 項
温度分布が悪い	器内の風の流れが悪い	風の流れをよくする	4.3 項
	試料からの発熱が大きい	発熱を小さくする	—
	換気量が多すぎる	ダンパ開度を小さくする	—
温度が不安定になる	換気量が多すぎる	ダンパ開度を小さくする	—
	外囲温度が1時間に5℃以上の変化がある	外囲温度の変化が安定してから運転を再開する	—
	発熱の大きな試料の電源が入ったり切れたりしている	発熱を小さくする	—
温度が徐々に設定温度より高くなる	試料の発熱が大きい	試料の発熱を小さくする	—
異臭や煙が出る	設置直後は、高温で棚板、棚受が焼け異臭や煙の出る場合があります	故障ではありませんので、そのままご使用ください	—

### 7.3 ヒューズの交換

---

ヒューズが切れたときは、次の手順で交換します。付属品のヒューズをご用意ください。

- ① 主電源スイッチを切ってください。
- ② 配電室扉を開けてください。
- ③ ヒューズを取り外して、切れているかどうか確認してください。
- ④ ヒューズが切れていれば新しいものと交換します。

・ヒューズを交換しても、すぐ切れるときは、お買い上げ店またはエスベックエンジニアリング株式会社にご連絡ください。

### 7.4 軸断熱フィルタの交換

---

軸断熱フィルタが汚れたときは、次の手順で交換します。付属品の軸断熱フィルタをご用意ください。

- ① 主電源スイッチを切ってください。
- ② 試料枠を固定しているジョイント部のボルトを緩めて、ジョイント部から試料枠を外してください。
- ③ 軸断熱フィルタ受けを回して外してください。
- ④ 軸断熱フィルタが汚れていれば、新しいものと交換します。